



真空ポンプ防音エンクロージャー

For example, standard noisy equipment without MS NOISE Noise Reduction Enclosure



ラボにおける騒音は作業者にとって大きなストレスとなります。一定レベルを超える騒音は人体に障害を引き起こし、蓄積性があります。ラボにおける静穏な作業環境を提案します。

- 特殊発泡体により騒音知覚において最大75%を低減
- 最適な防音を保ちながら、効率的な熱放出の空気管理システムを採用。温度過上昇を検知するアラームを設置
- ほとんどの製造メーカー製品に対応




For example, standard vacuum pump with MS NOISE Noise Reduction Enclosure



製品コード	外寸 (WxDxH)cm	対応真空ポンプ
NRVPシリーズ		
NRVP-BOX-S	26 x 46 x 40	Edwards ; E2M0.7, E2M1.5 PFEIFFER; Duo2.5
NRVP-BOX-RV3	30 x 60 x 55	Edwards; RV3, RV5 Varian; DS102
NRVP-BOX-B	46 x 67 x 56	Edwards; XDS5, XDS10 Oerlikon Leybold; SV40
NRVP-BOX-GWT	43 x 74 x 59	Edwards; RV3, RV5, RV8, RV12, E2M2, E2M8, E2M18, E2M28, E2M30 Varian; DS102, DS602, HS602, HS652 Oerlikon Leybold; SogevacD16 PFEIFFER; Duo5M
NRVP-BOX-MS40	56 x 67 x 55	Varian ; MS40+
NRVP-BOX-XDS	52 x 70 x 61	Edwards ; XDS35i Others
NRVP-BOX-SV65	53 x 92 x 46	Oerlikon Leybold; SV65 (on AB Scienc instrument) Edwards; RV3, RV5, RV8, RV12, E2M2, E2M8, E2M18,
NRVP-BOX-FP1	32 x 75 x 30	E2M28, E2M30 Varian; DS102, DS602, HS602, HS652
DBLシリーズ		
DBL-SIN-BOX-ACP	42 x 82 x 54	DBLSIN; Alcatel ACP40
DBL-BOX-DB30	51 x 74 x 58	上記GWT欄に記載されているEdwards, Varianのポンプを2つ一緒に収納できます。
DBL-BOX-MS40	90 x 74 x 50	Varian MS40+ x 2(unit)
DBL-BOX-SV65B	97 x 83 x 60	Oerlikon Laybold SV65 x 2(unit), Edwards XDS46i +XDS100i
DBL-SIN-BOX-ORB	46 x 70 x 54	Thermo LTQ OrbiTrap

全てのエンクロージャーに専用トレイ（別売）があります。また、価格、その他の仕様についてはお問い合わせください。



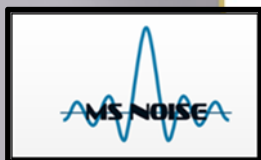

真空ポンプオイル交換用製品

-オイルドレインポンプ&キット-



図1



図2



図3

廃液
ボトル

迅速で容易かつ、汚れの少ないオイル交換 - すべての真空ポンプに適合！

真空ポンプ製造メーカーは、粗引きポンプへの損傷を防ぐため、及びポンプの寿命を延ばすために定期的なオイル交換を推奨します。オイル交換の煩わしさが理由で定期的に行われなかったことがあります。なぜオイルは定期的に交換されないのでしょうか？

オイルの交換は容易ではありません。作業時にオイルはあちらこちらに漏れ広がります。重いポンプは、移動することが困難です。そこでMS NOISE™ は、オイルドレンバルブおよびオイル交換ポンプキットを考案しました。操作は簡単、次のようになります。

1. ご使用のポンプからオイル出口密栓を外し、ドレインバルブに交換します。(図1)
2. 図2のようにドレインバルブにオイル交換ポンプの片方を挿入、他方を廃液ボトルに接続します。オイル交換ポンプを動作させバルブを“OPEN”にするだけです。(図3)

製品コード

製品名

ODK

オイルドレインキット

(ご使用の真空ポンプのメーカー、型式を連絡ください。)

ODP

オイルドレインポンプ

(100V仕様)

その他のエンクロージャー (特注サイズについてはお問い合わせください。)

超音波洗浄機用エンクロージャー	外寸 (WxDxH)cm	対応機種
USB3	希望のサイズに変更可能で価格はサイズにより変動します。	
ウォーターチラー用エンクロージャー		
WAT-900	56 x 79 x 80	Thermoflex900 or 1400
WAT-POLY6000-BOX	71 x 57 x 88	Polysciences 6000シリーズ
窒素ガス発生装置用エンクロージャー		
NTR-BOX-PARK21	51 x 120 x 80	パーカーニトロフロー用
NTR-BOX-PK	53 x 84 x 93	ピークサイエンスN ₂ ガス発生機用、対応機種についてはお問い合わせください。



日本総代理店

アルテア技研株式会社

輸入製品部

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3

TEL:045-473-6211 /FAX:045-473-2884

e-mail: import@altair.co.jp

販売代理店